
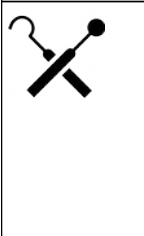
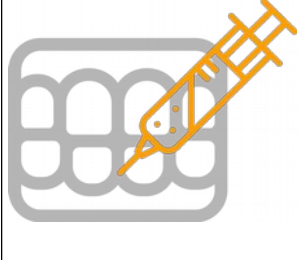
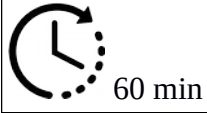
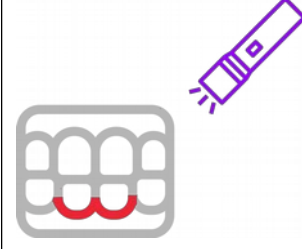
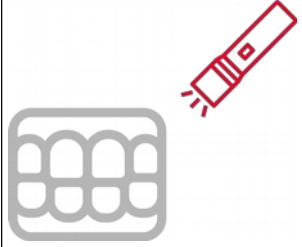

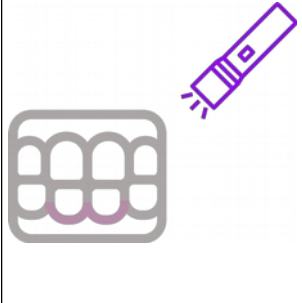



Visita Diagnostica	
	<p>Fare il buio nel locale. Illuminando con la lampada UV i siti infiammati è possibile osservare un orletto rosso/violaceo. Questo si manifesta perchè i batteri producono porfirine che sono fluorescenti. Mostrare la fluorescenza al paziente mediante uno specchio.</p>
Trattamento con Aladent	
	<p>Procedere con il trattamento non chirurgico della malattia parodontale (terapia causale o di mantenimento). Completare la procedura. In presenza di copioso sanguinamento differire l' applicazione di Aladent ad altra seduta.</p>
	<p>Applicazione Aladent. Inserire il prodotto nella tasca con il puntale dedicato (capillare). Completare l' operazione per ogni sito. Aiutarsi con apribocca o rulli di cotone per minimizzare la salivazione e la diluizione del prodotto</p>
	<p>Incubazione 60 minuti (in sala d' attesa)</p>
	<p>Opzionale. Fare il buio nel locale. Verificare l' assimilazione di Aladent utilizzando la lampada UV. E' possibile osservare una intensa fluorescenza rosso/violacea.</p>
 	<p>Attivazione fotodinamica. Illuminare <i>ciascun sito</i> con la lampada rossa per 7 min La punta dell' illuminatore va tenuta a contatto del sito o nell' immediata prossimità</p>
	<p>Opzionale. Fare il buio nel locale. Illuminare con lampada UV. Verificare che la fluorescenza rosso/violacea sia scomparsa o fortemente attenuata. Questo indica che la dose di luce rossa è stata sufficiente per la completa attivazione del prodotto.</p>
	<p>Visita di controllo a 10/12 gg senza sondaggio e controllo con sondaggio dopo 20/24 settimane con eventuale ritrattamento.</p>